

微生物検査に  
最適なサンプル液を



*New product*

パルス式ホモジナイザー

**Pulsifier II** パルシファイヤー

MICROGEN  
BIOPRODUCTS

確かな技術の世界から

株式会社 **セントラル** 科学貿易


# パルスのでサンプル調整。 サンプルの損傷を最小限に抑え、微生物を遊離。

パルス式だから...

## ◎ サンプル液中の残渣が非常に少ない!

パドル式と違い、機器内部のビートリングを前後に激しく振動させ、その力でサンプルから微生物を遊離させます。サンプル破碎物の少ない、検査に有用なサンプル液の調整が可能です。

イメージ

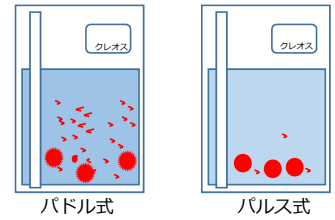

## ◎ 処理時間が短い!!

パドル式で通常30~60秒ほどかかる処理をおよそ15秒で処理することが可能です。



処理完了!

得意!!

## ◎ 硬いサンプルでもOK!!!

穀類、殻・骨などを含むサンプルなど、パドル式ではホモジナイズバッグが破けてしまうような硬いサンプルにご活用できます。



他にも...

### ● 簡単操作 作業者スキルを選びません



バッグをセットして...

スタートボタンを押すだけ!!

### ● お手軽メンテナンス



フロントドアが前面に大きく開口。清掃しやすい構造です。

楽々  
お手入れ

### 仕様

寸法	460 × 320 × 320mm
質量	10.7kg
電源	AC100-115V 1.6A 50/60Hz
動作環境	温度：10～40℃ 湿度：5～90% 結露なきこと ※室内ラボ専用機器
最大容量	250ml(推奨)
処理時間	15秒 / 30秒

### 検査をより快適に

滅菌済ホモジナイズバッグ  
高品質 **ストマフィルター シリーズ**



### 製品に自信あり!!

徹底した品質管理。  
破れにくい! 漏れにくい!

確かな技術を世界から...

株式会社 **セントラル** 科学貿易

本社  
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6  
TEL : 03-5627-8170  
URL://www.cscjp.co.jp/

大坂支店 TEL : 06-6325-3171  
九州営業所 TEL : 092-482-4000  
札幌出張所 TEL : 011-764-3611  
技術センター TEL : 047-701-6100